

Wir begleiten
Ihre erfolgreiche
Getränkeherstellung

**SCHLISSMANN
SCHWÄBISCH HALL**




Tel. 07 91 - 9 71 91-0 • Fax 9 71 91-25
C. Schliessmann Kellerei-Chemie GmbH & Co.KG
Auwiesenstr. 5 • D-74523 Schwäbisch Hall

Getränkeanalytik

Bedienungsanleitung für die Stativ-Heizplatte SH 85

Stand 12_2005

Seite 1/1

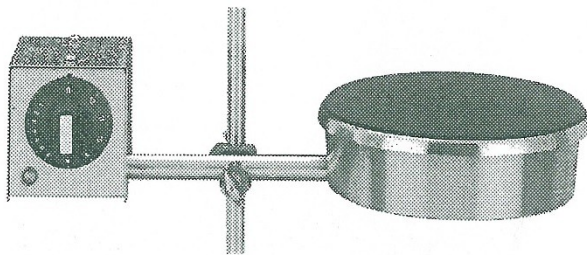

Vor Inbetriebnahme des Gerätes vergleichen Sie bitte die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Ihrer vorhandenen Netzspannung. Das Anschlusskabel ist unbedingt ganz abzuwickeln und den Schutzkontaktstecker nur in eine geerdete Steckdose zu stecken.

1. Einschalten

Die Geräte sind mit einem kombinierten Hauptschalter und Leistungsregler ausgestattet sobald der Hauptschalter die Nullposition verlässt, leuchtet die gelbe Kontrollleuchte auf. Zur Gewährleistung standardisierter Heizleistungen ist vor der Benutzung eine Aufheizphase von ca. 5 Minuten einzuhalten.

2. Stufenlose Temperaturregelung

Die Heizung wird von einem Energieregler in Intervallen ein- bzw. ausgeschaltet. Je höher die Zahl auf dem Drehknebel, desto länger die Heizintervalle. Bei Stellung "12" beträgt die Leistung 100 %. Die Zahlen dienen dem Wiederauffinden einmal ermittelter Werte. Die gelbe Kontrollleuchte signalisiert die Heiz- bzw. Pausenintervalle.

3. Technische Daten:

Stromanschluss: 230 V, 50 Hz
Leistung: 450 Watt

4. Wartung und Pflege

Außer gelegentlicher Reinigung ist keine Wartung erforderlich.

5. Ersatzteile

| | |
|--------------------|----------------------|
| Ersatzheizplatte | Best.-Nr.: HR 85 |
| Energieregler | Best.-Nr.: EGO 50.17 |
| Kontrolllampe gelb | Best.-Nr.: KL 9 ge |

Bei Ersatzteilbestellung bitte Geräte-Nr. angeben.